

まいりハ 使用手順

1. ACアダプターのプラグを
本体後部のジャックに



2. 電源スイッチをONにする



3. リハビリグローブを装着する



4. 本体プラグにグローブの
カップラーをセット



5. 自動運転/手動運転の選択を



6. 手動運転の場合は、手動スイッチを
本体にセット



7. 訓練時間を設定




8. 動作スタートスイッチON



9. グーパーの動作間隔を調整



※ 制御ボックスを移動する時は
本体後部の取手で

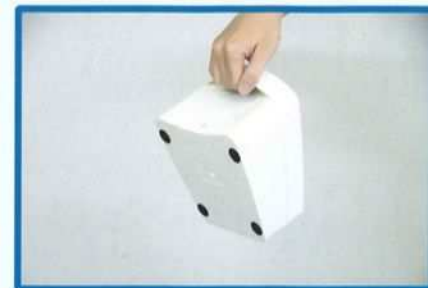

rehands グローブの装着方法



1

麻痺している手の親指をいれます



2

グローブを手首に仮止めいたします



3

「つまみ」をひっぱりながら全ての指をグローブに入れます



4

ペローズ(蛇腹)と「つまみ」をひっぱりながら指先までしっかりとグローブにはめ込みます



5

グローブをきちとはめて、仮止めしていた手首をかたく絞めなおします



6

指がぬけないように固定バンドを指の間に通してとめます



※ 電源の切り忘れにご注意ください!